

Any-Seal[®] RC

우수한 흐름성과 강한 점착성으로 안정적인 밀폐력을 제공하는 레진 기반 근관 실러

빈틈없이
채우다



빠르고 간편한 사용

오토믹싱 팁을 사용하여 빠르고
간편한 사용으로 술자에게 편리함을 제공

안정적인 밀폐

낮은 용해도, 강한 점착력
리오펜도 시, 제거가 용이




Any-Seal® RC

우수한 흐름성과 강한 점착성으로 안정적인 밀폐력을 제공하는 레진 기반 근관 실러

Any-Seal® RC는 우수한 흐름성(Optimum flowability)과 함께 탁월한 밀폐력(Excellent sealing)을 제공하여 근관벽에 강하고 안정적으로 결합하며, 미세 누출을 최소화하여 재치료 가능성을 낮춥니다. 또한 우수한 생체적합성(Excellent biocompatibility)과 낮은 조직 용해도(Low tissue solubility)로 장기적인 안전성을 보장합니다. 뛰어난 방사선 불투과성(Excellent radiopacity)으로 충전 상태를 방사선 사진에서 명확하게 확인할 수 있으며, 레진 변색을 일으키지 않는 비변색성(Non-staining to the resin) 포물러를 적용하여 치아 및 수복물의 색 안정성을 유지합니다.

Any-Seal® RC는 정밀한 밀폐와 우수한 작업성이 요구되는 모든 근관치료에서 의료진의 높은 임상적 성공을 돕는 최적의 실러입니다.

물성

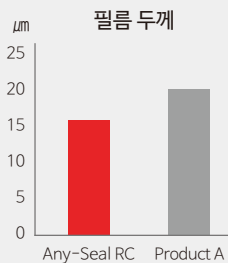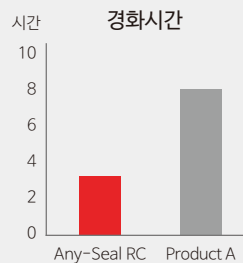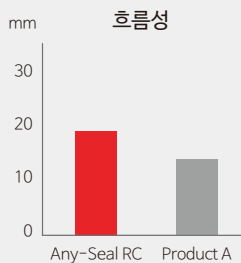

* 출처: 메디클러스 R&D



* 사람사랑치과 황성연 원장

적응증

- 실활치 근관의 영구충전
- 근관 내 미세틈새 봉쇄
- 재근관 치료
- 내부 치근흡수증

방사선불투과성



Any-Seal RC

Product M

Product K

경화시간

- Working time 1hr / 23°C
- Setting time 3.5hr / 37°C

적용방법



믹싱패드에 1:1 비율로 Any-Seal RC를 혼합한다



준비된 거타퍼차에 Any-Seal RC를 적용한다



Any-Seal RC를 묻힌 거타퍼차를 근관 내 적용한다



커터기로 거타퍼차를 잘라내어 준다

제품구성



#503-1 Any-Seal® RC

Any-Seal RC 10g x 1ea

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com



REF:20250815 V1