

Any-Com[®] Line

나노 사이즈의 지르코니아 필러를 함유한 직접수복용 광중합형 복합레진 솔루션

효율과 심미



Any-Com[®] Line

모든 종류의 와동에 적용되는 효율적인 복합레진 솔루션

Any-Com[®] 제품군은 직접수복 과정에서의 다양한 임상 요구사항들을 충족시키는 5가지 제품으로 구성됩니다. 전통적인 방식으로 적용되는 향상된 물성의 Any-Com[®] 과 Flow, 진료의 효율성을 높여주는 Bulk Fill과 Injectable, 소아환자의 특별한 요구사항을 위한 Rainbow까지 Any-Com[®] 제품군의 검증된 물성과 심미성이 진료의 품질을 높이고 임상의 자신감을 높여줍니다.

더 커진 다양성, 더 강화된 물성, 더 큰 자신감!


특별한 나노-필러 테크놀로지




과거 제품의 비정질 필러

Any-Com[®] 제품군의 구형 필러

- Any-Com[®] 이 제품은 전치부와 구치부 수복 모두에 사용되는 높은 강도와 심미성을 가진 패커블 레진입니다. 이 재료의 특별하고 균형잡힌 화학조성은 이 제품이 한번의 광중합으로 최대 2.5mm까지 광중합될 수 있게 합니다.

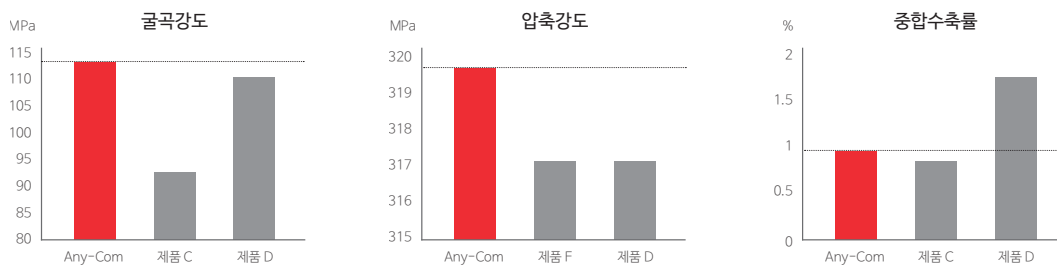


- Any-Com[®] Flow 이 제품은 Any-Com[®]의 흐름성을 가진 버전입니다. 패커블 타입의 재료와 마찬가지로, 이 재료는 한번의 광중합으로 최대 3.0mm까지 광중합될 수 있습니다.

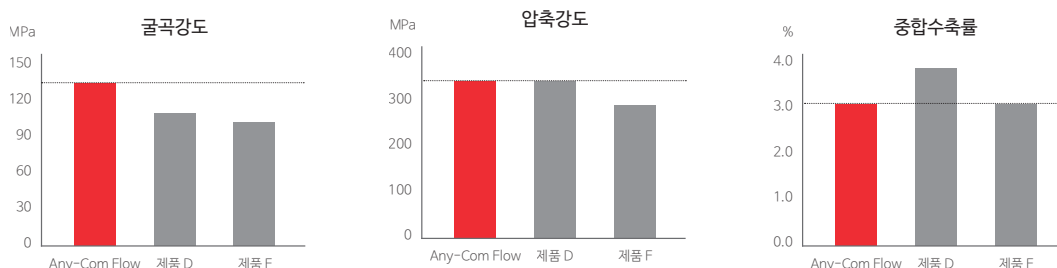


- Any-Com[®] Flow Rainbow Any-Com[®] Flow의 확장된 버전인 이 제품은 다양하고 특별한 임상의 요구사항을 충족시키기 위해 다음 3가지 쉐이드로 제공됩니다: Pink, Yellow, Orange




- Any-Com® Bulk 최대 4mm까지 광중합 가능한 이 제품은 기존 재료들과 유사한 품질을 제공하는 동시에 진료의 효율성을 높여줍니다. 지속적인 불소 방출은 치아 구조를 강화하고 우식 발생 위험을 효과적으로 낮춰 줍니다.

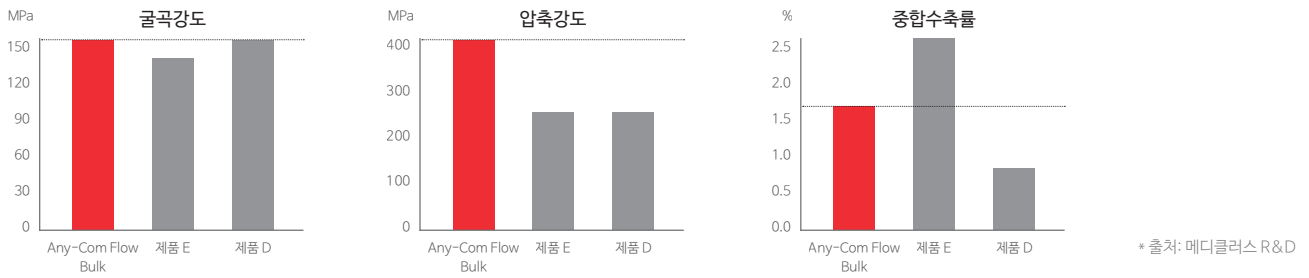


4mm 벌크충전으로 간소화된 진료과정

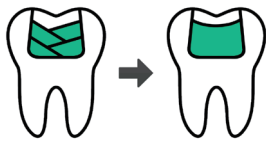

Self-Leveling

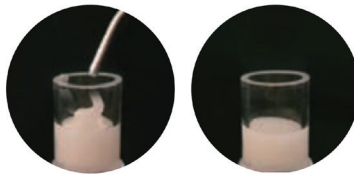

방사선 불투과성

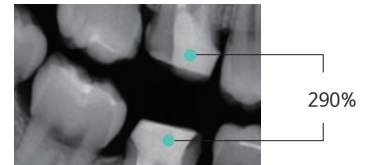

- Any-Com® Injectable Any-Com®과 Any-Com® Flow의 중간 점도를 가진 이 제품은 적용 후 무너지지 않으며 필요한 곳에 부드럽게 침투하는 요변성을 가집니다. 우수한 강도와 마모저항성은 장기간 유지되는 심미 수복물을 제작하기에 적합합니다. 결과적으로, 흐름성과 강도를 모두 가진 재료로 효율적이고 편한 진료가 가능합니다.

적응증


- Any-Com®: 1-5급 와동 수복, 직접/간접 수복물의 리페어
- Any-Com® Flow, Any-Com® Flow Rainbow: 베이스 라이너, 3-5급 와동 수복, 소와열구 전색, 직접/간접수복물의 리페어, 언더컷 차폐
- Any-Com® Injectable: 1-5급 와동 수복, 소와열구 전색, 직접/간접 수복물의 리페어, 언더컷 차폐
- Any-Com® Bulk: 베이스 라이너, 1-5급 와동 수복, 코어 빌드-업, 근관치료 후 치관봉쇄

이점

- 강화된 내구성과 마모저항성: 지르코니아 필러 함유
- 심미적인 카멜레온 효과: 잔존 치질과 자연스러운 웨이드 매칭
- 효율적인 연마과정과 높은 광택: 나노 사이즈의 구형 필러 함유
- 다양한 제품들의 조직화된 웨이드 컨셉
- Hi-Bond® Universal과 함께 검증된 시스템



자연치와 유사한 투명도

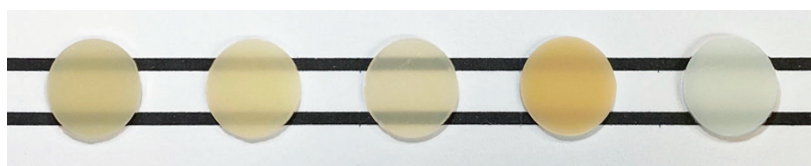

	Any-Com®	Any-Com® Flow	Any-Com® Bulk	Any-Com®	Any-Com® Flow
웨이드	A2	A2	A2	OA3	OWT

제품구성



301H Any-Com® Universal Kit

Any-Com® 4g x 6ea
Any-Etch® 3ml x 1ea
Hi-Bond® Universal 5ml x 1ea

A1 A2 A3 A3.5 A4

301-00 Any-Com® Refill

Any-Com® 4g x 1ea

B1 B2 C2 D2

OA2 OA3 TL WT
OP A2E A3E

302H Any-Com® Kit

Any-Com® 4g x 5ea
Any-Etch® 3ml x 1ea
Hi-Bond® Universal 5ml x 1ea



306 Any-Com® Flow 2g x 4ea / Any-Etch® 3ml x 1ea

A1 A2 A3 A3.5 A4

306H Any-Com® Flow 2g x 4ea / Any-Etch® 3ml x 1ea / Hi-Bond® Universal 5ml x 1ea

B1 B2 C2 OA2 OA3

306-00 Any-Com® Flow refill 2g x 2ea

OWT TL



306-32 Any-Com® Flow Rainbow Pink 2g x 1ea

Pink Yellow Orange

306-34 Any-Com® Flow Rainbow Yellow 2g x 1ea

306-36 Any-Com® Flow Rainbow Orange 2g x 1ea



307-11~307-15 Any-Com® Bulk 2g x 1ea

A1 A2 A3 TL Blue



307-16 ~ 307-20 Any-Com® Injectable 2g X 1ea

A1 A2 A3 TL Blue

메디클러스 직접수복 솔루션



Any-Etch®/ Any-Etch® Classic
Dento-Etch Plus



Hi-Bond® Universal



Any-Com® Line



Desens® Bio-Care

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877
서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com



KRRR20250616 V1