


NEW

Any-Cem[®]

지르코니아와 고강도 간접수복물의 합착을 위한 자가접착성의 이원중합형 레진 시멘트

간편한 적용,
강력한 결합

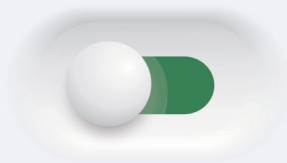

Any-Cem[®]

빠르고 강력한 지르코니아 합착

Any-Cem[®]은 자가중합과 광중합이 모두 가능한 자가접착성의 레진 시멘트입니다. 간편한 적용과정과 우수한 기계적 결합력이 특성인 이 제품은 지르코니아와 같이 고강도 세라믹 재료로 제작된 간접수복물의 합착에 권장되며, 전통적인 시멘트와 접착성 합착재의 장점을 모두 가지고 있습니다.

특별한 접착성 모노머 MDP 함유로 줄어든 진료과정

MDP는 지르코니아와 같은 세라믹과 다양한 메탈 수복물, 치질 사이에서 안정적인 화학적 결합을 형성합니다. 그 결과, 추가적인 전처리가 필요하지 않고 진료 시간이 줄어듭니다


우수한 접착

테스트된 타사 제품들과 다르게, Any-Cem[®]은 광중합 후와 자가중합 후 모두에서 우수한 결합력을 보여줍니다. 따라서, 메탈-세라믹과 같이 광조사가 제한된 상황에서도 우수한 결합이 보장되고, 이는 이 제품이 티타늄이나 지르코니아와 같은 수복물과의 합착에도 적합하다는 것을 말해줍니다.

적응증

- 지르코니아: 크라운, 브릿지, 근관 포스트
- 올-세라믹: 크라운, 3-유닛 브릿지
- 간접복합레진: 근관 포스트
- 메탈, 메탈-세라믹: 인레이, 온레이, 크라운, 브릿지, 근관 포스트
- 티타늄: 임플란트 어버트먼트 수복물

적용과정

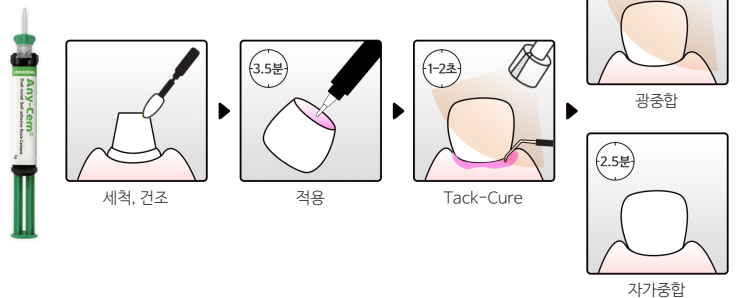

이점

- 손쉬운 적용: 기능성 모노머 MDP 함유로 치아의 전처리와 접착과정 불필요
- 효율적인 진료: 캡슐 혼합이나 기구, 장비 불필요
- 다양한 주사방식: 편리한 오토믹스-팁, 경제적인 에코-팁
- 손쉬운 과잉시멘트 제거
- 편리한 상온보관: 1 - 30 °C

제품구성



#203 Any-Cem

Any-Cem[®] 6g 1ea
Automix tips 10ea
Eco-tip 1ea
Mixing pad 1ea

#203-1 Any-Cem White

Any-Cem[®] 6g 1ea
Automix tips 10ea
Eco-tip 1ea
Mixing pad 1ea

#203-3 Any-Cem TL

Any-Cem[®] 6g 1ea
Automix tips 10ea
Eco-tip 1ea
Mixing pad 1ea

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877
서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

