

One-Temp™ Line

다양한 적응증을 충족시키는 두 가지 탄성과 두 가지 강도의 광중합형 임시수복재

빠르고 쉬운
임시수복



치료전략을 지원하는 점도와 탄성, 쉐이드

와동의 크기와 복잡성에 따른 재료 선택
심미성과 가시성을 고려한 세 가지 쉐이드

다재다능한 임시수복재

임시수복, 고정, 봉쇄, 구조물 형성 등 다양한 적용
신뢰할 수 있는 제조사가 제공하는 검증된 임시수복 시스템

One-Temp™ Line

광중합형 충전재인 One-Temp™와 Once-Fil® Flow, One-Temp™ Flow가 임시수복 과정에 다양한 이점을 제공합니다.

One-Temp 제품군의 제품들은 임상에서의 다양한 적응증을 충족시키기 위해 두 가지 점도와 두 가지의 탄성으로 제공됩니다. 높은 탄성을 가진 One-Temp™와 Once-Fil® Flow는 평행한 벽을 가진 깊은 인레이 와동의 임시수복에 적합합니다. 상대적으로 낮은 탄성을 가진 One-Temp™ Flow는 장기적으로 유지되는 표면이 큰 임시 온레이나 크라운의 제작에 사용될 수 있습니다.

One-Temp 라인의 제품들은 임시시멘트의 추가적인 사용없이 1-2급 와동을 임시수복하거나 임시 구조물을 형성하는 광중합형의 단일구성 제품입니다.

적응증

One-Temp™, Once-Fil® Flow (고탄성)

인레이 (평행한 와벽을 가진 깊은 와동, 작은 언더컷이 있는 와동),
임플란트 스크류 액세스 홀 봉쇄, 폴리카보네이트나 메타크릴레이트로
제작된 임시 크라운과 브릿지의 이장

One-Temp™ Flow (저탄성)

온레이 (상대적으로 큰 와동, 적은 유지력을 가진 와동), 동요치 고정,
교정치료 중 교합램프 형성, 근관치료 중 임시충전, 세척제 격리를 위한
구조물 형성, 인상재 뒤틀림 방지를 위한 임플란트 코핑 사이의 부목 형성


이점

● 두 가지 탄성



One-Temp™(고탄성), Once-Fil® Flow (흐름성, 고탄성)

마진을 손상시키지 않고 손쉽게 제거할 수 있는 이 제품은 평행한 와벽을 가진
깊은 와동과 임플란트 스크류 홀의 봉쇄에 특히 적합합니다. 이 제품의 특별한
모노머 혼합물은 재료에 높은 탄성을 부여하고 손쉬운 제거를 가능하게 합니다.

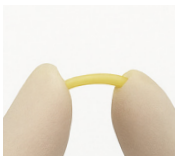

One-Temp™ Flow (저탄성)

One-Temp™보다 높은 강도를 가지는 이 제품은 유지와 저작에 장점이 있고,
상대적으로 더 큰 와동에 적합합니다.

● 세 가지 셰이드



White, Yellow: 심미적인 임시수복
Blue: 잔존치질과 구분 용이

제품구성



One-Temp™ 3g X 3ea

#103-1 One-Temp™ Blue
#103-2 One-Temp™ Yellow



Once-Fil® Flow 1.2ml X 5ea

#101-1 Once-Fil® Flow Blue
#101-2 Once-Fil® Flow Yellow



One-Temp™ Flow 1.2ml X 5ea

#104-1 One-Temp™ Flow Blue
#104-2 One-Temp™ Flow A2
#104-3 One-Temp™ Flow White

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

