

LC-Resin™

쉽고 빠른, 광중합형 패턴레진

정확한 연결, 안정된 코핑



No mixing. No odor. No shrinkage.

정밀·효율적 보철 연결을 위한 완벽한 해결책

LC Pattern Resin

광중합 정밀도가 보장하는 최적의 보철 연결

LC-Resin™

정확한 형상과 완벽한 적합을 위한 보철 패턴 제작의 스마트 솔루션

LC-Resin™ 은 간편한 시린지 타입으로 설계되어 빠르고 손쉬운 적용이 가능합니다. 프리믹스된 원스텝 포몰러이기 때문에 파우더 - 리퀴드 혼합 과정이 필요 없어 더욱 빠르고 청결한 작업이 이루어집니다. 무취(odor-free) 재질로 작업 환경을 쾌적하게 유지하며, 제거 시 잔사가 남지 않아 재료 낭비를 최소화합니다. 0% 수축(Zero Shrinkage)을 통해 우수한 치수 안정성과 정확성을 제공하며, 높은 비용 효율성까지 갖추어 다양한 기공·임상 케이스에 이상적인 솔루션입니다.

성능

- 광중합형으로 작업속도가 빠름
- 탄성계수 : 1200Mpa
- 굴곡강도 : 50Mpa
- 광중합깊이 : 5mm


용도

- 임플란트 임프레션 코핑의 지그 제작
- 파셜 덴처의 클라스트 패턴
- 브릿지, 인레이, 온레이 패턴
- 텔레스코프 외관 제작
- 덴처의 메탈 프레임워크 패턴

적용범위



임플란트 지그



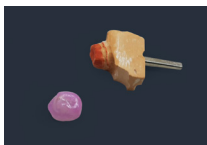


골드 크라운



캡 크라운

적용과정

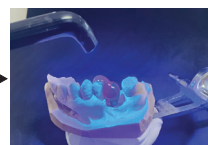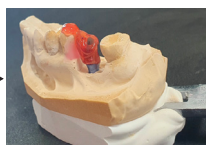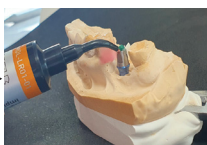

제품구성



LC-Resin™

#602-1 LC-Resin Red 14g x 1EA / Disposable tips

#602-2 LC-Resin Violet 14g x 1EA / Disposable tips

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com



KRFL20251107 V1